

# Comment utiliser le TIF

(test immunochimique fécal)

## AVANT DE COMMENCER :

- Lisez attentivement toutes les directives.
- Mangez et buvez comme d'habitude.
- NE FAITES PAS le TIF si vous constatez la présence de sang dans vos selles ou dans vos urines.
- Pensez à uriner avant de faire le test.

## ATTENTION! LES RÉSULTATS SERONT INEXPLOITABLES SI :

- la quantité de selles recueillies est trop importante;
- l'échantillon a gelé;
- l'échantillon n'est pas déposé auprès de votre fournisseur de soins de santé dans les 48 heures suivant le prélèvement;
- les selles ont été en contact avec l'eau ou l'urine présente dans la cuvette des toilettes;
- les renseignements sur l'étiquette du tube ou sur la fiche de demande d'analyse sont incomplets ou illisibles.

## DIRECTIVES POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON



Sortez le tube du sac, puis écrivez lisiblement les renseignements suivants sur l'étiquette :

- vos nom et prénom;
- votre numéro de carte d'assurance-santé;
- la date et l'heure du prélèvement.



Pour éviter que l'échantillon entre en contact avec l'eau, disposez le papier plastifié entre le siège et la cuvette ou utilisez un contenant en plastique propre et sec (voir l'image ci-dessus).



Recueillez vos selles sur le papier plastifié ou dans le contenant en plastique mis en place à cet effet.




Dévissez le bouchon du tube et sortez le bâtonnet de prélèvement.



Prélevez un échantillon de selles en grattant avec l'extrémité du bâtonnet.


**IMPORTANT** – Ne prélevez que la quantité suffisante de sorte à recouvrir l'embout strié. Une quantité de selles trop importante rendra l'échantillon inexploitable.

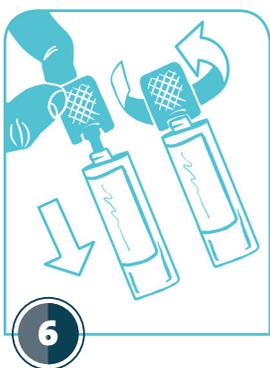


Remettez le bâtonnet dans le tube, puis refermez-le bien (ne le rouvrez plus).



Jetez le reste des excréments dans la toilette et tirez la chasse. Jetez le papier plastifié ou le contenant en plastique à la poubelle et lavez-vous les mains.

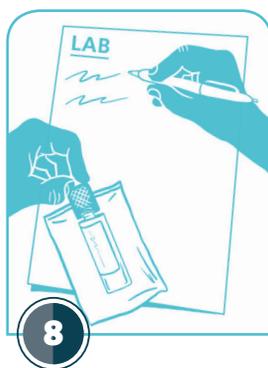

Placez le tube dans le sac refermable en plastique, fermez le sac et inscrivez la date et l'heure du prélèvement sur la fiche de demande d'analyse.

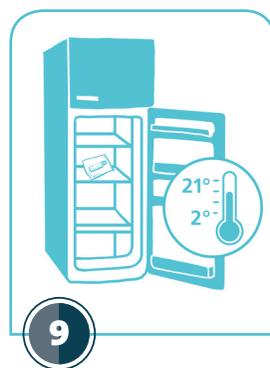

Conservez le sac à la température ambiante ou au réfrigérateur (mais pas au congélateur) jusqu'à ce que vous alliez déposer votre échantillon de selles, au plus tard 48 heures après le prélèvement.



Apportez votre échantillon et la fiche de demande d'analyse au centre de santé de votre localité ou au laboratoire de l'hôpital dans les 48 heures.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le programme de dépistage à [ColonCheck.Yukon@gov.yk.ca](mailto:ColonCheck.Yukon@gov.yk.ca) ou téléphoner au **867-667-5497** ou au **1-844-347-9856** (sans frais).